

Karta Gwarancyjna

1. Firma Pulinno sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą w Pabianicach udziela gwarancji co do jakości dystrybuowanego przez siebie wyrobu medycznego. Karta gwarancyjna dołączona jest do instrukcji używania.
2. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że wyrób medyczny dystrybuowany przez Pulinno sp. z o.o. jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
3. Okres gwarancji na głowicę wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży.
4. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie medycznym.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - a. Części ulegające naturalnemu zużyciu,
 - b. Uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne sprzętu spowodowane przez użytkownika,
 - c. Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - i. Niewłaściwego lub niezgodnego z Instrukcją użytkowania, konserwacji lub przechowywania,
 - ii. Niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji
 - iii. Używania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów innych niż zalecane przez Gwaranta,
 - iv. Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne osoby napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 - v. Działania siły wyższej (powódź, pożar, uderzenie pioruna itp.).
 - d. Usterki spowodowane niewłaściwym czyszczeniem wyrobu medycznego lub zaniechaniem tej czynności.
7. Gwarancja udzielona na wyrób medyczny wygasa w przypadku:
 - a. Dokonania przez nieuprawnione podmioty (w szczególności przez nieuprawniony serwis, bądź samego nabywcę wyrobu medycznego), jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji sprzętu.
 - b. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń bądź ich zamazanie uniemożliwiające odczytania zawartych w nich informacji może być potraktowane jako próba ingerencji w wyrób medyczny nieuprawnionego podmiotu i jako takie skutkować wygaśnięciem gwarancji.
8. Zgłoszenie reklamacji wyrobu medycznego z tytułu udzielonej na niego Gwarancji można dokonać bezpośrednio u Gwaranta.
9. Gwarant organizuje transport i odbiera urządzenie od pacjenta.
10. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego wyrobu medycznego do serwisu Gwaranta.
11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana urządzenia na nowe) decyduje Gwarant.
12. W przypadku wymiany sprzętu lub jego części na nowe, przechodzą one w posiadanie pacjenta/klienta, natomiast wadliwy wyrób medyczny lub jego części wymienione w trakcie naprawy przechodzą w posiadanie Gwaranta.
13. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt (np. wymiana materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, itp.).
14. Sprzęt oddawany do naprawy musi być kompletny (tzn. zawierać wszystkie elementy oryginalne znajdujące się w zestawie). Do naprawy przyjmowany jest sprzęt oczyszczony z płynów, czysty i suchy. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia użytkownika kosztami doprowadzenia wyrobu medycznego do stanu spełniającego wymogi przyjęcia do serwisu.
15. Wraz ze sprzętem w ramach reklamacji należy składać: dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, czytelny i dokładny opis usterki czego dotyczy, dane użytkownika: imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail.
16. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności rzeczy sprzedanej.
17. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień z niniejszej Gwarancji.

Importer:

Pulinno sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

PULINNO
innovative healthcare

Serwis healthin.com:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
Budynek 36
95-200 Pabianice
Infolinia: 572 155 110

Głowica rozpylająca

Głowica rozpylająca wraz z pojemnikiem na lek stanowi część zamienną do nebulizatorów.

Zgodnie z rekomendacją producentów wymiana głowicy powinna nastąpić regularnie po 3 do 6 miesięcy użytkowania, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną nebulizację.

Nebulizator można stosować do wszystkich leków z wyjątkiem leków pentamidynowych oraz cieczy zawierających estry, oleje, cząsteczki zawieszin łącznie z ekstraktami ziołowymi a także preparatów zawierających kwas hialuronowy.



Proces czyszczenia głowicy rozpylającej

Do pojemnika na lek wlej od 3-6 ml wody o temperaturze nie wyższej niż 40 stopni C




Dodaj do wody od 2-5 kropli octu spirytusowego kuchennego o stężeniu 10%



Uruchom urządzenie i przeprowadź jeden cykl nebulizacji.
NIE WDYCHAJ OPARÓWI



W celu dezynfekcji przetrzyj powierzchnię głowicy, użytych akcesoriów oraz ewentualnie pinów (styków) w nebulizatorze i głowicy alkoholem min. 75%

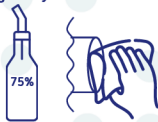

Pamiętaj! Nie dotykaj membrany w głowicy rozpylającej, bo grozi to jej uszkodzeniem.



Pozostaw pojemnik na lek do całkowitego wyschnięcia. Pamiętaj, że proces czyszczenia należy wykonywać każdorazowo po zakończonej nebulizacji.



Importer:

Pulinno sp. z o.o.
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
95-200 Pabianice

PULINNO
innovative healthcare

Serwis healthin.com:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5
Budynek 36
95-200 Pabianice
Infolinia: 572 155 110